



CINCHA ESPECIALIZADA PARA LA RODILLA

La cincha activa para la rodilla de EMPI es parte de un sistema diseñado para brindar una estimulación eléctrica a la zona de la rodilla y proporcionar un alivio sintomático y tratamiento del dolor de rodilla en general. La cincha especializada está compuesta por un material textil transpirable y ligero que envuelve la rodilla y se asegura con Velcro™.

En EE. UU., la ley federal estipula que este dispositivo es vendido exclusivamente por médicos u otros profesionales autorizados o bajo prescripción médica. Para usar con un neuroestimulador aprobado para la distribución dentro de Estados Unidos.

INDICACIONES:

El sistema se encuentra indicado para el alivio sintomático y el tratamiento del dolor crónico intratable, en el tratamiento coadyuvante para el dolor post-quirúrgico y post-traumático agudo y para el alivio del dolor asociado con la artritis.

MANTENIMIENTO:

Verifique la cincha especializada antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño. Reemplace los electrodos StimGel cuando sea necesario. Consulte la sección Uso de los electrodos para obtener recomendaciones de mantenimiento para StimGel. Consulte la sección Lavado de la cincha o la etiqueta en la cincha para obtener las instrucciones de lavado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Para obtener información sobre riesgos relevantes, contraindicaciones, advertencias, precauciones y efectos secundarios adversos, consulte el Manual del operador del dispositivo de electroterapia. Si utiliza electrodos StimGel demasiado pequeños en el dispositivo, puede provocar quemaduras térmicas. La cincha nunca se debe utilizar sin electrodos StimGel. La cincha especializada no está diseñada para ser utilizada como soporte inferior de la pierna. La cincha para la rodilla es para uso en un solo paciente. No comparta la cincha con otras personas ya que puede correr el riesgo de experimentar reacciones adversas o contraer enfermedades.

PRECAUCIÓN:

No aplicar sobre la piel dañada. En caso de que aparezca una erupción o quemadura en la piel, discontinúe el uso de inmediato y comuníquese con su médico.

GARANTÍA DE 90 DÍAS:

Empi reparará o sustituirá, en sus instalaciones, cualquier producto defectuoso. Esta garantía no es aplicable a productos dañados por uso incorrecto, o reparados o alterados por alguien que no sea Empi en sus instalaciones de Clear Lake, SD.

Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita. Ninguna persona está autorizada para asumir compromisos en nombre de Empi en lo relacionado con la garantía más allá de lo expresado en este documento.

NOTA: el período de garantía comienza a partir de la fecha en que se compró al fabricante.



Empi, Inc.
205 Highway 22 East Clear Lake, SD 57226
www.empi.com
800.328.2536
Fabricado en México para Empi.

360419 Rev A ©2013 Empi, 06/13 Reservados todos los derechos.
Precaución: dispositivo de venta exclusiva, que deberá ser efectuada por un médico o bajo prescripción facultativa, conforme a lo estipulado en las leyes federales.

Sin látex



Cincha especializada para la rodilla

Número de pieza: 235677



INSTRUCCIONES DE USO

Lea el manual de usuario del dispositivo antes de usar.

Para hacer otro pedido, llame a Empi al
800.328.2536

Electrodos StimGel de Empi - 199599-001 (paquete de cuatro)

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1. Coloque la cincha extendida con las cuatro zonas conductivas con broches plateados hacia arriba.
- 2. Retire el protector del lado de la CUADRÍCULA de los electrodos StimGel.
- 3. Presione el lado de la CUADRÍCULA del electrodo StimGel sobre las zonas con broches plateados en la cincha.

ADVERTENCIA: *Los electrodos StimGel deben cubrir cada zona conductiva antes de comenzar a usarlos.*

- 4. Retire el protector restante y **GUÁRDELO** para volver a aplicarlo a los electrodos StimGel entre usos.
- 5. Siéntese en el borde de una silla firme y estable. Con la rodilla levemente doblada (45°) y con el pie completamente apoyado en el piso.
- 6. Con las correas abiertas en la lengüeta larga de plástico, aplique la zona conductiva de la cincha sobre la rodilla directamente sobre la piel, asegurándose de que la abertura quede sobre la rótula (patela). Con los electrodos StimGel alineados en cada lado de la rodilla, aplique presión lentamente en la sección superior de la cincha para asegurar los electrodos superiores contra la piel. Las solapas inferiores de la zona conductiva se pueden ajustar para ayudar a colocarlas levemente de costado. Después de colocar, aplique una leve presión sobre las zonas conductivas inferiores para asegurarse de que se adhieran correctamente. Para volver a colocar las zonas conductivas, retire la cincha completamente y con cuidado. Cuando vuelva a justar los electrodos StimGel pegados a la piel, hágalo con cuidado, ya que los electrodos tienden a enrollarse.
- 7. Asegure la correa superior pasando la lengüeta larga de plástico a través del anillo de ajuste superior y luego tire de la correa hacia atrás para asegurar el Velcro™ de manera cómoda. Sin cambiar la posición de las solapas conductivas inferiores, asegure la correa inferior de la misma manera.
- 8. Conecte la unidad Active TENS (estimulador) de Empi colocándolo en la parte que sobresale y presione hasta escuchar un clic. Encienda el estimulador y ajústelo según las instrucciones del estimulador o del médico para el tratamiento.
- 9. Cuando finalice la sesión de estimulación, apague el estimulador.



ALMACENAMIENTO:

- 10. Retire la cincha lentamente. Los electrodos StimGel se despegarán de la piel y permanecerán pegados a la cincha. **Los electrodos StimGel permanecerán en la cincha para su almacenamiento.**
- 11. Vuelva a colocar en el electrodo el protector que guardó. Asegúrese de colocar el lado que dice “ON” contra la superficie del electrodo StimGel.
- 12. Pliegue la cincha y guárdela en su envase hasta el próximo tratamiento. Volver a colocar los protectores, plegar la cincha y guardarla en la bolsa con cierre reutilizable prolongará la vida útil de los electrodos StimGel.

OTROS AJUSTES:


- A. Después de ponerse de pie con el dispositivo colocado, tal vez sea necesario realizar algunos ajustes. En caso de que las correas se muevan hacia abajo de manera significativa y estén sobre el muslo o la pantorrilla, las almohadillas antimovimiento pueden ayudarlo a reducir el movimiento y brindar una comodidad adicional. Antes de asegurar la correa a través del anillo de ajuste, coloque la parte posterior de la almohadilla (con Velcro) sobre el lado interior de la correa. Ajuste la posición de la almohadilla según sea necesario. Después, asegure la correa como se indicó anteriormente, asegurándose de que el lado blando de la almohadilla, con capas de silicona, esté en contacto con la piel. Ajuste según sea necesario.
- B. También puede retirar e intercambiar las correas en la cincha. Para lograr un tamaño más grande, puede mover la correa del muslo hasta la correa de la pantorrilla y puede colocar por encima la correa adicional más larga (XXXL) incluida en el kit.
- C. Puede recortar las correas si es necesario para que se ajusten a sus necesidades. Retire la correa completamente del anillo de ajuste y retire la pieza con Velcro en los dos lados ANTES de recortarla. Recorte el lado de tela de la correa según sea necesario. Vuelva a colocar en el extremo la pieza con Velcro en los dos lados. Asegure firmemente ese mismo extremo al anillo de ajuste coincidiendo con el mismo lado de la otra correa en la cincha. Ajuste la cincha para determinar si necesita hacer más ajustes.
- D. La cubierta incluida en el paquete puede añadir protección a la unidad TENS y evitar que se presionen botones de programación accidentalmente. Una vestimenta holgada puede favorecer un movimiento cómodo mientras se utiliza el dispositivo.



USO DE LOS ELECTRODOS:

Puede extender el uso de los electrodos y de los electrodos StimGel siguiendo estas recomendaciones:

- Limpie, enjuague y seque la piel antes de cada uso
- Almacene los electrodos como se indica en las instrucciones del embalaje
- Si el gel del electrodo se seca, puede agregar unas gotas de agua a la superficie de gel (lado que se adhiere) para recuperar el gel adhesivo del electrodo. Antes de aplicar sobre la piel, permita que el electrodo descanse durante unos minutos para que vuelva a fijarse.

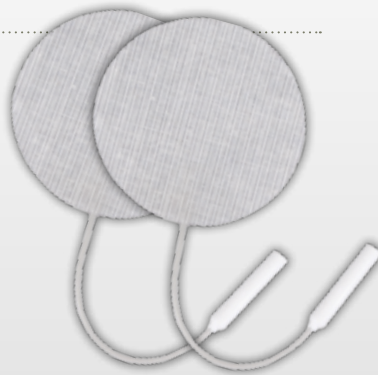

LAVADO DE LA CINCHA:

Lavar a mano, 40 °C (104 °F)
Lavar con cuidado y utilizar un detergente suave
No utilizar acondicionador ni lejía y no secar en secadora
No retorcer, no planchar, no limpiar en seco
Secar con la cincha extendida



Para hacer otro pedido, llame a Empi al
800.328.2536

Electrodos StimGel de Empi - 199599-001 (paquete de cuatro)